

WICHTIG

Verwenden Sie dieses Gerät nicht ohne Empfehlung einer medizinischen Fachperson für Häufigkeit und Dauer der Behandlungen. Wenn Sie keine solche Empfehlungen haben, nehmen Sie vor dem ersten Gebrauch mit Ihrem lokalen Game Ready-Vermieter Kontakt auf.

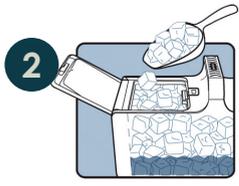
Die gebräuchlichste Anwendung ist eine Kältetherapie von mindestens 4 Anwendungen am Tag, für jeweils ca. 30 Minuten, mit mindestens 30 Minuten Pause zwischen den Behandlungen. Die grösste Wirkung der Kältetherapie bewegt sich im Temperaturbereich von 5 °C bis 15 °C.

Im Allgemeinen werden Kompressions-Empfehlungen von «keine» bis «niedrige» Druckeinstellung während der ersten 24 bis 48 Stunden nach der Operation empfohlen. Sofern die Behandlung während den ersten 48 Stunden nach der Operation als angenehm empfunden wurde, können Sie den Druck auf «mittel» steigern. Wir empfehlen, den Modus «hohen» Druck niemals anzuwenden.

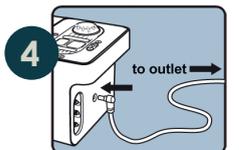
Bitte lesen Sie unbedingt auch die Informationen zu den Kontraindikationen und Warnungen im beiliegenden offiziellen Benutzerhandbuch.

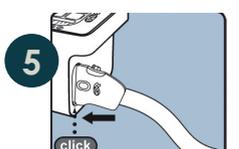
SO STARTEN SIE DEN GRPro 2.1

- 

1 Sauberes Wasser NUR bis zur Wasser-Füll-Linie auffüllen. NICHT ÜBERFÜLLEN!
- 

2 Mitgelieferte Cool-Packs verwenden, alternativ können auch Eiswürfel verwendet werden, bis das gesamte Reservoir voll ist.
- 

3 Deckel zum Wasserreservoir schliessen.
- 

4 Den AC Adapter zuerst an der Steckdose anschließen und erst danach mit dem Game Ready GRPro 2.1 verbinden.
- 

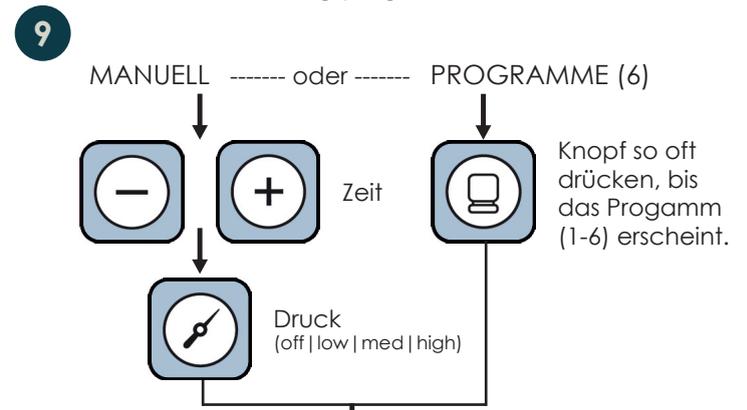
5 Das große Ende (*roter Knopf*) des Verbindungsschlauches am Gerät anschließen.
- 

6 Die Manschette eng, aber bequem an der betreffenden Körperstelle fixieren.
- 

7 Nun das kleinere Ende (*blauer Knopf*) des Verbindungsschlauches mit der Manschette verbinden.
- 

8 Power-Knopf drücken.

Nun das Behandlungsprogramm einstellen:

- 

9 MANUELL ----- oder ----- PROGRAMME (6)
Zeit
Druck (off | low | med | high)
Knopf so oft drücken, bis das Programm (1-6) erscheint.
- 

10 Start-Knopf drücken, um die Behandlung zu beginnen.
- 

11 Gewünschte Temperatur einstellen, indem Sie das Temperatur-Rad nach rechts für mehr Kälte oder nach links für weniger Kälte drehen.

HINWEIS

Sofort nach der Operation schmilzt das Eis am schnellsten, da das Game Ready-System dann am meisten Körperwärme von der verletzten Stelle entfernt. Füllen Sie daher Eis nach Bedarf nach. Um eine optimale Kältetherapie aufrechtzuerhalten.

Weitere Warnhinweise und Kontraindikationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Steuereinheit.

SIE BRAUCHEN HILFE?

Bei medizinischen Problemen:

1. Mit Ihrer medizinischen Fachperson in Verbindung setzen.

Bei technischen Problemen mit dem Gerät:

1. Siehe unter Fehlerbehebung nebenan.

2. Das beiliegende Benutzerhandbuch konsultieren.

3. Keine Hilfe gefunden: Besuchen sie www.rehalax.at

→ FAQ oder kontaktieren Sie uns direkt.

